

BEZSZWOWY BIUSTONOSZ KOMPRESUJĄCY

zdezynfekowany i higienicznie zapakowany – przygotowany do użytku klinicznego

ROZMIARY

POMIAR POD BIUSTEM					
cm	68-77	78-87	88-97	98-107	108-117
inch	27-30	31-34	35-38	39-42	43-46



UNIWERSALNE MISECZKI					
EU	70/75	80/85	90/95	100/105	110/115
GB	32/34	36/38	40/42	44/46	48/50
US/CA	32/34	36/38	40/42	44/46	48/50
AU	10/12	14/16	18/20	22/24	26/28
FR	85/90	95/100	105/110	115/120	125/130
Symbol					



NA PIERWSZY RZUT OKA


Użyj symboli, aby
szybko odnaleźć
odpowiedni rozmiar
produktu.

Wskazania

- rekonstrukcja piersi
- redukcja piersi
- powiększenie piersi
- lifting piersi
- operacje onkoplastyczne
- mastektomia

JAK DOBRAĆ ODPOWIEDNI ROZMIAR BIUSTONOSZA

amoena

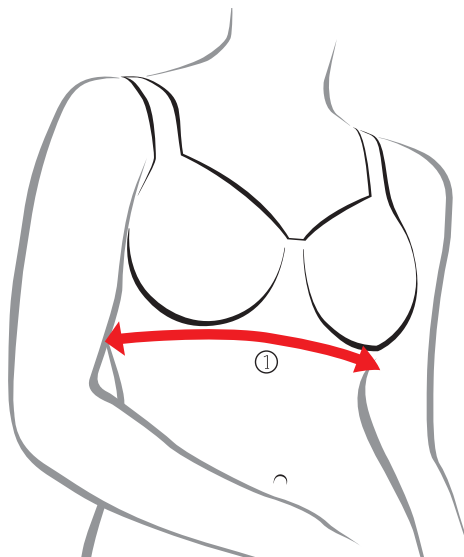

① Pomiar pod biustem

Gdy pacjentka znajduje się **w pozycji stojącej w wygodnym staniku**, zmierz obwód jej tułowia w miejscu gdzie znajduje się pas stanika.

Upewnij się, że taśma miarki nie jest skrzywiona i/lub nie ześlizguje się w dół, bądź nie jest zbyt wysoko.

Odnajdź swoje pomiary w tabeli na drugiej stronie, aby określić rozmiar stanika.

WSKAZÓWKA

**Dokonaj pomiaru stojąc
naprzeciwko lustra**

LEYLA SB

Model 44605 ☐ biały
44606 ☒ czarny

Miseczki: uniwersalne
obustronne kieszonki